


BRUKSANVISNING

för

MeDos Klocka

Art.nr.: 508 313

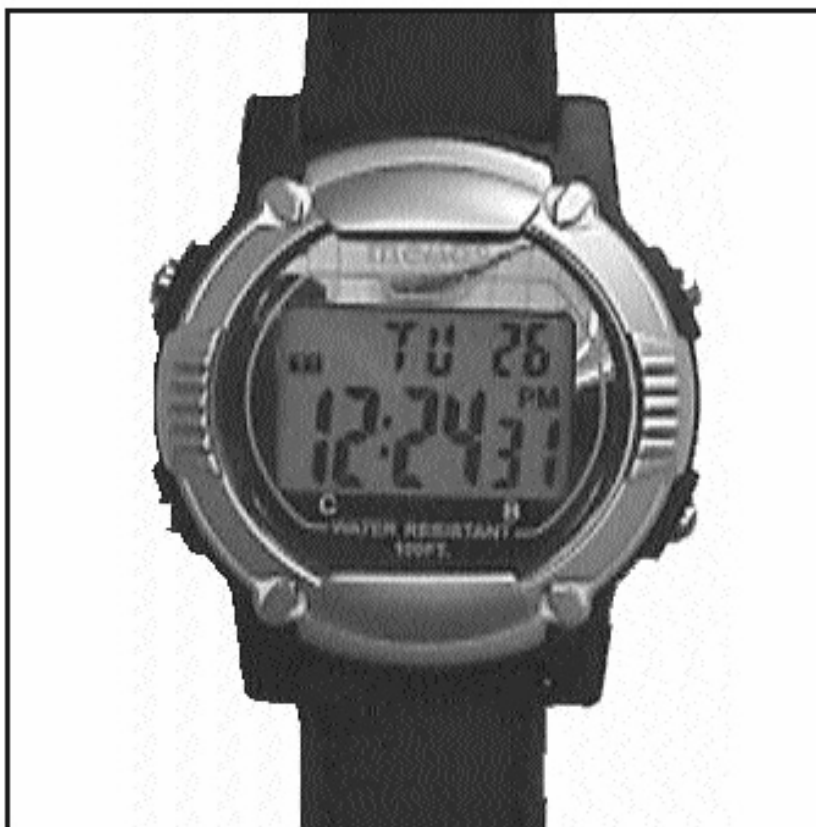

Version september 2009

CE

Innehållsförteckning

Introduktion	2
Knapparnas funktioner	3
Inställning av Tidszoner	3
Inställning av Tidszoner	4
Ställ larm	4
Ställ larm för önskad dag och datum.....	4
Chime funktionen:.....	5
Så väljs vibration eller ljud.....	5
Slå av larm funktionen	5
Timer funktionen.....	5
Re-set (återställ) Timer.....	6
Stoppurs fuktionen	6
Re-set (återställ) stoppuret	6
Batteribyte	7
Re-set /återställ alla funktioner på MeDos Klockan	7
Tekniska specifikationer	7
Säkerhet.....	8
Miljö.....	8

Introduktion

MeDos klockan är ett digitalt armbandsur med möjlighet att ställa upp till 6 larm per dygn. Klockan kan vara ett bra hjälpmedel för den som behöver bli påmind tex om att medicinen skall tas.

Möjligheten att motta larmen i form av vibrationer, gör att klockan passar bra för den som önskar en diskret påminnelse. Klockan programmeras manuellt.

Funktioner:


6 larm och chime, 2 Tidszoner, timer och stoppklocka.

Önskar du att använda Timer eller Stoppklocka-funktionen, se engelsk bruksanvisning.

Du kan välja om larmen skall komma som vibration eller ljud.

Klockan har bakgrundsbelysning i 3 sek, när du trycker in D.

Knapparnas funktioner

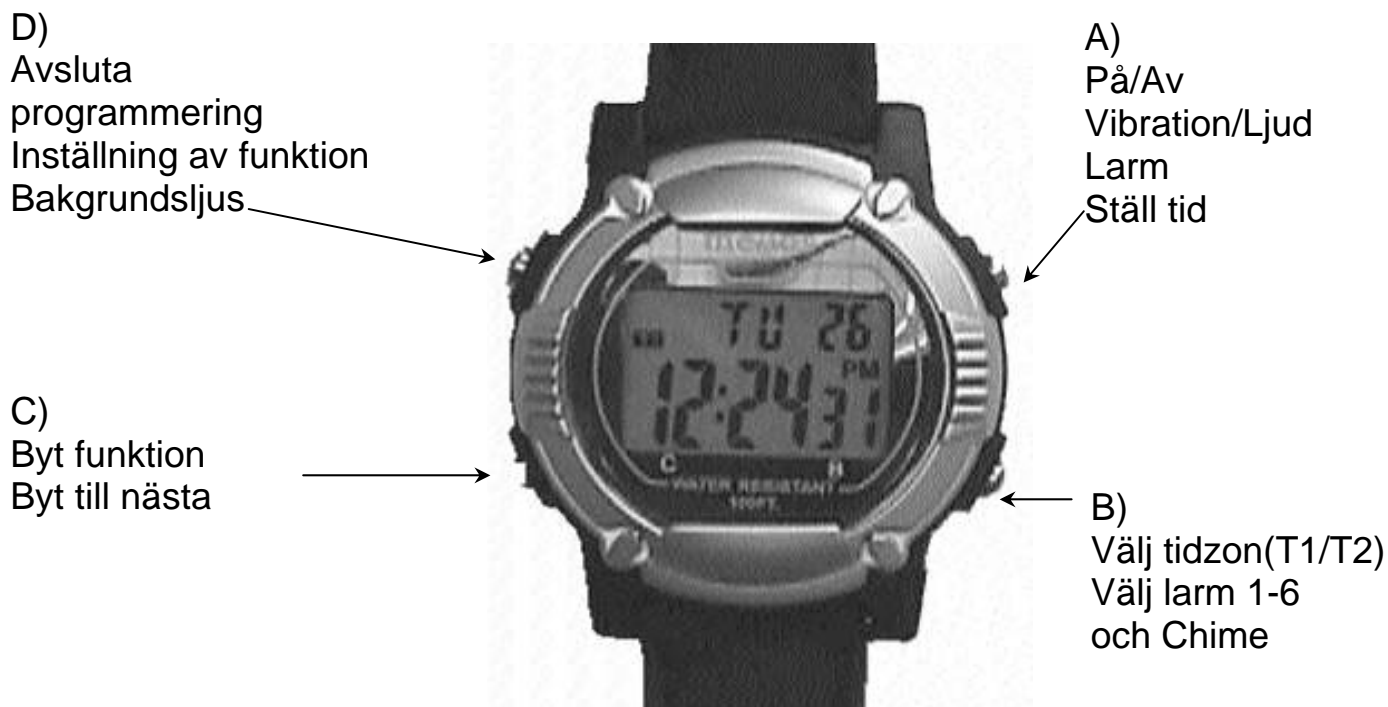

Ställ klockan

- Tryck C tills klockan visar TIME funktionen
- Tryck och håll D inne tills sekunderna blinkar
- Tryck C och timmar blinkar
- Ställ in rätt timme med A
- Tryck C och minuterna blinkar
- Ställ in med A
- Tryck C och årtal blinkar
- Ställ in med A
- Tryck C och månad blinkar
- Ställ in med A
- Tryck C och datum blinkar
- Ställ in med A
- Tryck C och veckodag blinkar
- Ställ in med A
- Tryck C och 12 eller 24 timmarsvisning blinkar
- Ställ in med A
- Tryck D för att avsluta inställningen

Inställning av Tidszoner

För inställning tryck (C) tills TIME funktionen visas på displayen.

- Normal tid: Tryck och håll (B) tills att T1 är valt
- Tidszone 2: Tryck och håll (B) tills att T2 är valt

Ställ larm

- Tryck C tills klockan visar AL-(1-6 eller Chime) funktionen
- Tryck B tills AL-(1) syns på displayen
- Tryck och håll D inne tills timmar blinkar
- Ställ in önskad timme med A
- Tryck C och minuter blinkar
- Ställ in önskad minutangivelse med A

Om larmen skall vara dagliga, avsluta inställningen genom att trycka D. Dessa (----) streck syns då överst till höger på klockans display.

- Tryck fram nästa larm (AL-2) med B
- Tryck och håll D inne tills timmar blinkar
- Ställ in önskad timme med A.
- Tryck C och minuter blinkar.
- Ställ in önskad tid med A.
- Tryck D för att avsluta inställningen
- Ställ de andra larmen på samma sätt.

Ställ larm för önskad dag och datum

- Tryck C efter att inställningen av minuter är klar, enligt ovan. Då blinkar (--)--- som anger att månad skall ställas.
- ställ in med A
- Tryck C och datum blinkar---(--)
- ställ in med A
- Tryck D för att avsluta inställningen

Larmen blir automatiskt aktiverade när du har ställt in önskad tidpunkt för larmen. När ett larm är aktiverat visas **(on)** längst ner till höger på displayen.

Chime funktionen:

Önskar du en signal varje hel timma?

- Tryck C tills klockan visar AL (1-6 eller Chime).
- Tryck B tills att CHIME syns på klockans display.
- Tryck och håll inne A tills att en klocksymbol syns på displayen.
Tryck fram TIME funktionen med C, och klockan visar normal tid. Den är nu klar att användas med inställda larm.

Så väljs vibration eller ljud

Larmen blir automatiskt aktiverade när du har ställt in önskad tidpunkt för larm.

1) Vibration:

Om du önskar att klockan skall vibrera vid larm, tryck och håll inne A tills du känner en kort vibration och en W-symbol visas på klockans display.
Vibrationen är nu aktiverad.

2) Pipljud:

Om du önskar att klockan skall pipa vid larm, tryck och håll inne A tills du hör ett pip och W-symbolen försvinner. Pip är nu aktiverad.

Slå av larm funktionen

- Tryck C tills att klockan visar AL (1-6 eller Chime) funktionen.
- Hitta de aktuella larmen med (B).
- Tryck A, och on-symbolen till höger för larmtidpunkten ersätts med (--).
- Detta larm är nu avstängt.

Timer funktionen

- Tryck C tills klockan visar Timer (Tmr) funktionen
- Tryck B för att välja typ av nedräkning
- Nedräkning /Count down stop (CS)
- Uppräkning /Count down up (CU)
- Upprepning /Count down repeat (CR)
- Tryck D och håll den inne i 5 sek till minuter blinkar
- Tryck A tills antal minuter visas
- Tryck C tills sekunderna blinkar
- Tryck A tills antal sekunder är korrekt
- Tryck D för att bekräfta

Re-set (återställ) Timer.

Gör på samma sätt som vid inställning av Timer, (00`00 00`00) skall då visas på displayen.

Använd A för att starta eller stoppa nedräkning.

Klockan kommer att ge en signal (pip eller vibration) när det återstår 3 min av nedräkningen:

3 pip= 3 min, 2 pip=2 min och 1 pip= 1 min.

När nedräkningen är klar signaleras det med 5 pip (eller Wib)

När nedräkningen stoppas, tryck B och den förhandsinställda tiden kommer att vara klar för ny nedräkning.

När nedräkningen stoppats, tryck B för att återställa tiden.

Stoppurs funktionen

- Tryck C tills du är i klockans stoppur (Chron)
- Tryck A för att starta tidtagning (run)
- Använd A för att starta eller stoppa tidtagning

Tryck B för att kontrollera mellantiden (spl) vänta i 5 sek så visas LAP för att kontrollera varvtiden.

Re-set (återställ) stoppuret

Stoppa tidtagning med A.

Tryck B (STP 00`00`00) skall visas på displayen.

Klockan fungerar inte som den ska

Om klockan visar en annan bild än tiden, kan en av knapparna ha blivit intryckt ofrivilligt. Tryck C tills att klockan kommer tillbaka till TIME-funktionen.

Klockan ger signaler på fel tidpunkt.

Tryck C till Timer- funktionen (Tmr) visas i displayen.

Startas / stoppas med A, eller se i bruksanvisning sida (?) för återinställning av Timer.

Tryck C tills Stoppur-funktionen (Chron) visas i displayen.

Startas / stoppas med A. Re-set (återställ) med B.

Kontrollera att tid och larm har samma tidszon. Se sid (?) om inställning av Tidzon.

Klockan ger signal varje timme

Tryck C tills AL (1-6 eller Chime) visas i displayen

Bläddra med B tills det står Chime (on) i displayen.

Tryck A och det står Chime (--) i displayen. Du har nu stängt av larm för varje timme.

Larmen vibrerar inte, även om klockan går

Tid för batteribyte.

Batteribyte

- Batteriets varaktighet - ca. 1 år, beroende på användning.
- Batteribyte skötes av leverantör.
- Klockan måste återställas / nollställas efter batteribyte!

Re-set /återställ alla funktioner på MeDos Klockan

Tryck och håll inne alla 4 knapparna tills klockan är nollställd. Klockan måste då programmeras på nytt, kontrollera att viktig information är nedskrivnen innan den återställs.

Tekniska specifikationer

- Batteriets varaktighet - ca. ett år, beroende på användning. Kortare tid när vibration används som larm.
- Fukttålig, tål vatten/fukt, men ska ej användas under vatten.
- Klockan är nickelfri. Baksidans metall del är i rostfritt stål. Vid allvarlig allergi måste en individuell värdering vidtas.
- Larm i 20 sekunder.
- Stoppa larmet genom att trycka in vilken knapp som helst.

Säkerhet

Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten med hänvisning till **NS-EN 1441 för medicinsk utrustning**. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument.

Vid dagligt bruk av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har tagit i drift eller ställt in produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB`s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Miljö

Emballagen är återvinningsbar och lämnas in tillsammans med papper och wellpappavfall.

Batteriet lämnas på miljöstation med uppsamling för batterier.

När produkten skall kasseras lämnas den in på kommunal återvinningsstation.

*Det är inte tillåtet att kopiera
bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse
från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av
hjälpmedlet ring till Falck Igel på
telefon 08 695 69 40**

Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B
S-117 61 Stockholm
Tel.: 08 695 6940
Fax: 08 695 6949

Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22
Postboks 123,
N-4952 Risør
Tlf: +47 37 14 94 50
Telefax: +47 37 14 94 70

E-post:
falckigel@falckigel.se
Hemsida:
www.falckigel.se
