

BRUKSANVISNING

för

Monitor 7" LCD Färg

Art nr: 332 821




Version Maj 2007

Inledning

7" färg monitor används tillsammans med trådlös Videokamera. Monitorn har färgskärm, beroende på vilken kamera som används så kan bilderna visas i svart/vitt eller färg. Med IR lampor påslagna kommer bilden vara i svart/vitt även om kameran är en färgkamera. Skärmen skiftar automatisk mellan färg och svart/vitt när det blir mörkt eller ljust. Medföljande sockel monteras på botten av monitorn, se fotot på framsidan av den här bruksanvisning.

Inkoppling av de olika kablarna till monitorn.

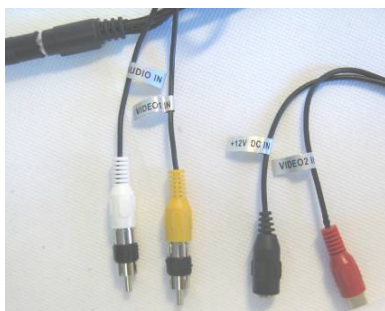


Strömförsörjningen kopplas in till den svarta kontakten märkt +12V in.

Anslut kabeln märkt AV till AV pluggen på monitorn, pil mot pil.

Anslut bild/ljud kontakterna från monitorn med bild/ljudkontakterna från mottagaren.

Kontakterna för bild är märkt Video, och kontakterna för ljud är märkt Audio. Utrustningen kommer inte att fungera om kontakterna kopplas fel.

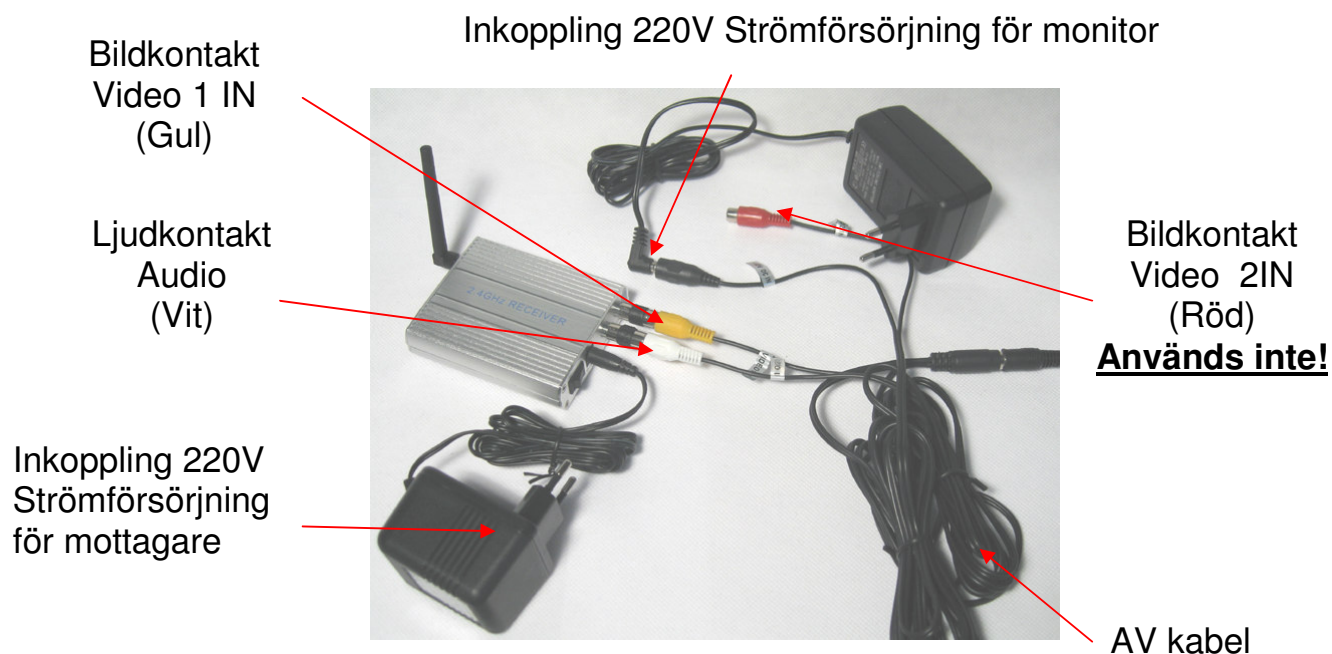

Inställningar



Hörlurar/headset

V1/V2/V3

välj i meny

Meny

Ljud ner

Ljud upp

Power.

Slå på apparaten

På framsidan hittar du knappen Power.

Tryck en gång på denna och skärmen går igång.

Se till att inkopplad Trådlös videokamera och mottagare är påslagna och igång. Bilden ska automatiskt visas på monitorn, om ingen bild syns tryck på knappen V1/V2/V3 tills bilden visas på skärmen.

Ljudet justeras med knapparna märkt VOL+ och VOL-.

Felsökning

Monitorn går inte igång:

Kontrollera att kablarna för ström är ordentlig intryckta i kontakten.

Bild och ljud saknas:

Kontrollera att all utrustning är inkopplad till ström och påslagen. Kontrollera att kablarna är rätt anslutna. Tryck på V1/V2/V3 knappen flera gånger.

Bild saknas:

Kontrollera att Video kabeln är rätt ansluten.

Ljud saknas:

Kontrollera att Audio kabeln är rätt ansluten och att kontakten är påslagen, eller försök att justera upp ljudet.

Meny

Genom att trycka på meny knappen finns möjligheten att ställa ljusstyrka, skärpa och färg. Justera upp/ner med VOL+ och VOL- knapparna.

För att komma ur meny läget, vänta 10 sekunder så sker det automatiskt.

Skötsel / Underhåll

Kan dammtorkas med en lätt fuktad trasa.

Rekommenderas att monitorn sänds till service för rengöring med jämna mellanrum om den används i dammiga omgivningar. Damm kan lätt antändas om man inte håller utrustningen fri från det.

Säkerhet:

Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten i hänvisning till **NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr**. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingar som är gjorda i detta dokument.

Vid dagligt bruk och när produkten tas i drift är det viktigt att tänka på säkerheten. I en bruksanvisning är det inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har ställt in produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer vid användning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

*Det är inte tillåtet att kopiera
bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse
från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av
hjälpmedlet ring till Falck Igel på
telefon 08 695 69 40**

Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B
S-117 61 Stockholm
Tel.: 08 695 6940
Fax: 08 695 6949

Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22
Postboks 123,
N-4952 Risør
Tlf: +47 37 14 94 50
Telefax: +47 37 14 94 70

E-post:
falckigel@falckigel.se
Hemsida:
www.falckigel.se
